
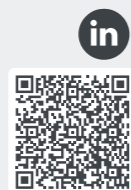
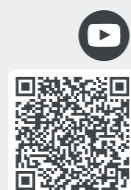


ULTRAZVU NA TERAPIJA

PhysioGo.Lite SONO

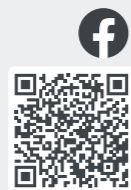

ASTAR.

Swit 33 Street
43-382 Bielsko-Biala
Poljska

telefonski brojevi
+48 33 827 18 69
+48 33 827 18 56

export@astar.eu

www.astar.eu



Sadržajna podrška:
www.ephysiotechology.com



U-PLS/EN-22-V1

ASTAR.

PhysioGo.Lite SONO



Ultrazvu na terapija naširoko se koristi u fizioterapijskim klinikama za liječenje mišićno-koštane boli putem fizikalnih terapija.

PhysioGo.Lite SONO uređaj je koji omogućuje u inkovitu ultrazvu nu terapiju kako u fizioterapijskim klinikama, tako i tijekom kućnih posjeta pacijentu. Napredna tehnologija tvrtke Astar jamstvo je pouzdanosti i točnosti parametara. Zahvaljujući gotovim programima terapija, uređaj pomaže fizioterapeutima da postignu najbolje moguće u inkovitu ultrazvu nu valova.

Saznajte zašto se isplati odabrati PhysioGo.Lite SONO.



5" ZASLON U BOJI
OSJETLJIV NA DODIR



3 VRSTE ULTRAZVU NIH
GLAVA
SnG
GU-1
GU-5



MOGUĆNOST RADA NA
BATERIJI
BATERIJU MOŽE
UGRADITI KORISNIK



MOGUĆNOST PULSNE
ULTRAZVU NE TERAPIJE



BAZA PODATAKA UNAPRIJED
POSTAVLJENIH PROGRAMA LIJEČENJA



BROJ KORISNIČKIH
PROGRAMA



GLAVA GU-1

s prednjom površinom od 1 cm² stvara val od 1 ili 3 MHz frekvencija. Koristi se za sonikaciju manjih dijelova tijela u klasičnoj ultrazvučnoj terapiji, LIPUS terapiji i kombiniranoj terapiji.

GLAVA GU-5

s prednjom površinom od 5 cm² (1 ili 3 MHz) primjenjuje se u ultrazvučnoj terapiji, kao i u terapijama u kojima se koristi fonoforeza. Ovaj standardni tip glave također omogućuje izvođenje LIPUS-a i kombinirane terapije.



GLAVA SnG

novost u asortimanu Astar ultrazvučnih uređaja, aplikator koji ne zahtijeva operatera, velike prednje površine (17,3 cm² ili 34,5 cm² ovisno o odabranom načinu djelovanja), koji se koristi u klasičnoj ultrazvučnoj terapiji, fonoforezi, LIPUS terapiji i kombiniranoj terapiji (u kombinaciji s elektroterapijom)

NOVO U NAŠOJ PONUDI



UDOBNOST KORIŠTENJA



UGRAĐENA BAZA PODATAKA PROGRAMA LIJEČENJA

PhysioGo.Lite SONO sadrži gotovu bazu programa liječenja za medicinska područja kao što su ortopedija, neurologija, estetska medicina, dermatologija, angiologija, reumatologija i sportska medicina. Također vam omogućuje izradu vlastitih programa i provođenje terapije u realnom vremenu. Dodavanje programa na popis favorita omogućuje vam brzo pronalaženje najčešće korištenih parametara u ultrazvučnoj terapiji.

LIPUS TERAPIJA

PhysioGo.Lite SONO uređaj nudi samo klasične tretmane ultrazvučnom terapijom, ali i mogućnost provođenja LIPUS (Low Intensity Pulsed Ultrasound) terapije, korištenjem niskofrekventnih pulsirajućih ultrazvučnih valova. Ova metoda posebno je cijenjena zbog svoje učinkovitosti u liječenju rana, opekotina, oštećenja živaca, degenerativnih bolesti i prijeloma kostiju. Također je izvršna podrška u liječenju nezaraslog (tzv. pseudoartroza) i usporenog srastanja.

