

Sveobuhvatni vodič za  
proizvode



# IZVRSNOST U TERAPIJI BOLI

Vodeća tehnologija rehabilitacije

## ŠTO JE ELEKTROMAGNETSKA STIMULACIJA


Serija proizvoda Salus Talent generira magnetsko polje od 3 Tesle koje je oko 600 puta jače od normalnog šipkastog magneta i prodire duboko u tijelo.

Ova snažna elektromagnetska snaga omogućila je fizioterapeutima vrlo učinkovito i osnovno liječenje akutnih i kroničnih bolova.




Snažno magnetsko polje (aplicirajući vrtložne struje duboko u unutrašnjost) prolazi kroz odjeću, tkiva i kosti, što stimulira područje liječenja duboko u tijelu.

### Elektromagnetska snaga

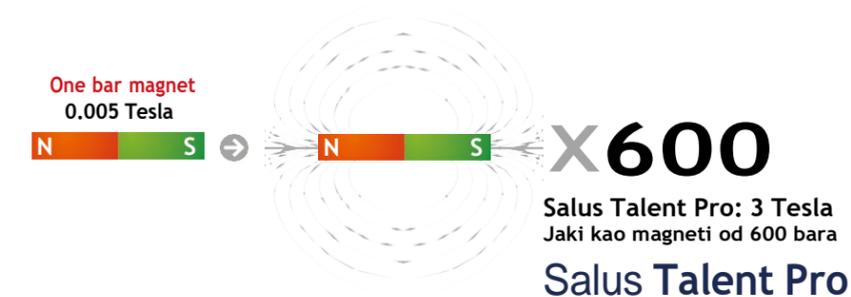


### Učinak elektromagnetske stimulacije

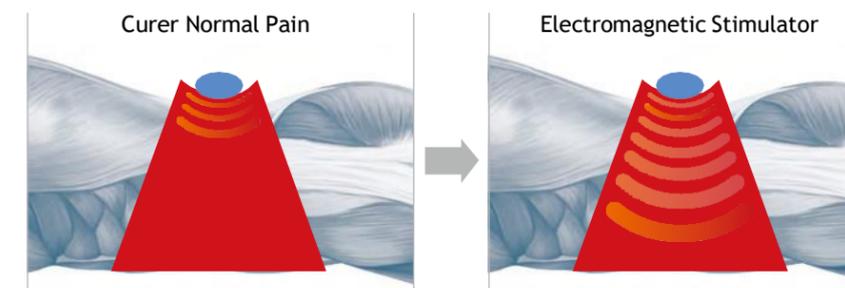

### Usporedba kliničke slike


#### Pacijent s L4 / 5 HNP

##### Prije liječenja

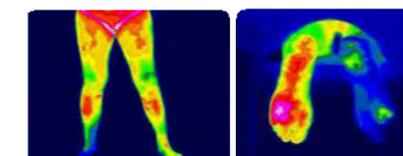

Desna noga i taban desnog stopala pokazuju nisku temperaturu zbog boli i slabe cirkulacije krvi.

##### Poslije liječenja

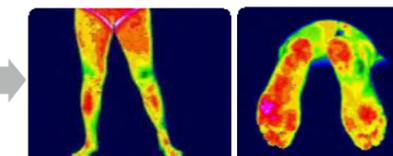

Međutim, nakon nekog elektromagnetskog liječenja, tretirana područja pokazuju normalnu temperaturu.

# Salus Talent Pro

Vrhunski i snažan uređaj za elektromagnetsku stimulaciju



## ZNAČAJKE I PREDNOSTI

- Duboko prodirući učinak liječenja od 3 Tesle
- Neinvazivna i beskontaktna sonda s pacijentom
- Dvije vrste magnetskih pretvarača za širu primjenu
- Jedinstveni pretvornik hlađenja cirkulacijom ulja za kontinuirano liječenje
- 3 vrste načina liječenja: automatski, ručni i korisnički (svaki način pruža 20 protokola)
- Zaslona osjetljiv na dodir (8" LCD) za lakše rukovanje

## SPECIFIKACIJA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Magnetska snaga       | 3 Tesla (i za velike i za male sonde)         |
| Kanal                 | 2 Ch  |
| Magnetska frekvencija | 1~100Hz                                       |
| Protokol liječenja    | Automatski: 20<br>Ručni: 20<br>Korisnički: 20 |
| Vrijeme liječenja     | 1~60 min                                      |
| Sučelje               | 8"LCD zaslon osjetljiv na dodir, Jog Shuttle  |
| Dimenzije             | 45 x 60 x 110 Cm                              |
| Težina                | 60 Kg   |

## GLAVNA KLINIČKA PRIMJENA



Vrat



Ruka




Leđa

## PODRUČJA PRIMJENE

- Ortopedija
- Rehabilitacija
- Genitourolog
- Sportska medicina



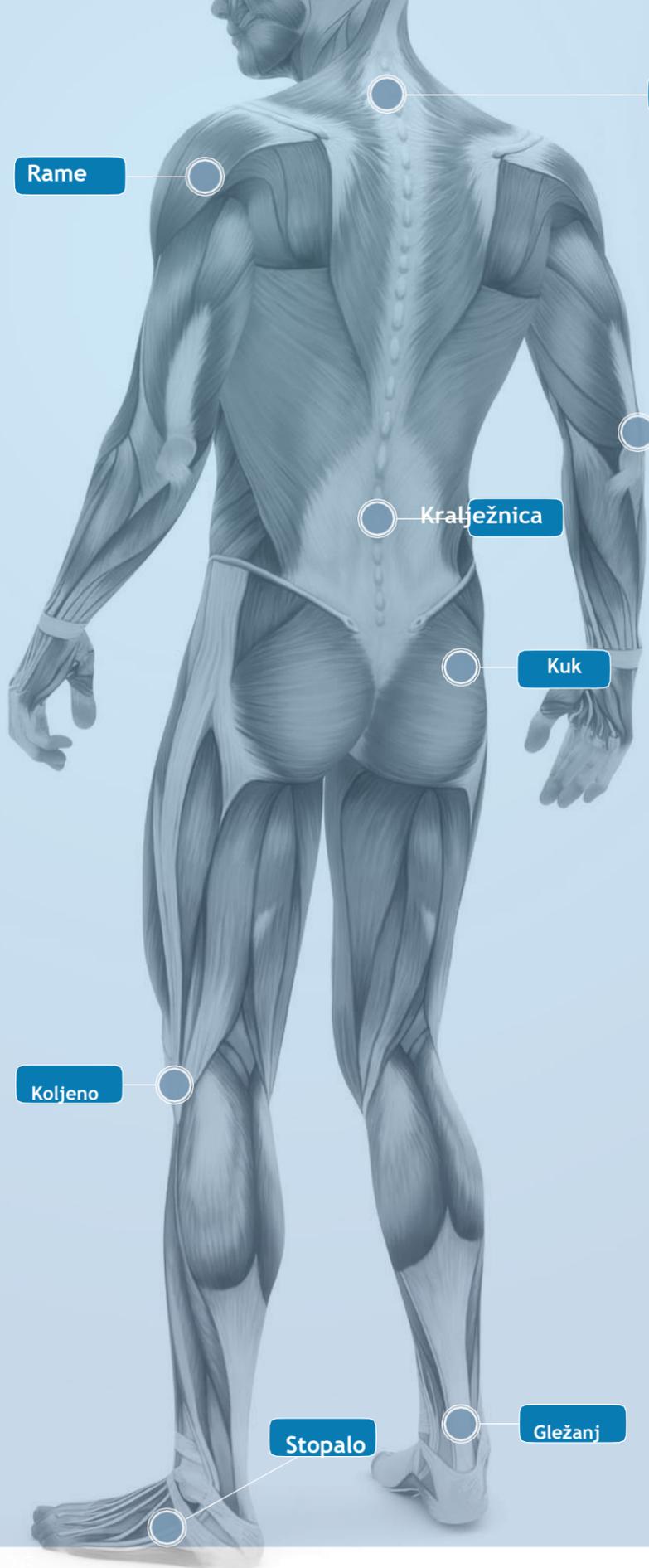

Cerviks

Rame

Lakat

Kralježnica

Kuk

Koljeno

Stopalo

Gležanj

## Kliničke indikacije

### • Salus-Talent Pro

Poremećaji mišićno-koštanog sustava

Degenerativni artritis, reumatoidni artritis, cervikalna bol, sportske ozljede, smrznuto rame, opuštanje mišića, kontrola boli nakon prometne nesreće

Poremećaji kralježnice

Akutni/kronični lumbago, giht kuka (išijas), spinalna bifida, spondilitis, kronična bol u leđima, bolest spinalnog diska, IMS tretman, TPI tretman



Pulsus Medical d.o.o.  
T: + 385 1 6626 546  
info@pulsusmedical.hr  
www.pulsusmedical.hr